

Installatie voor Macbook

NightWatch Update (v15.5)



Dit document beschrijft stap voor stap hoe u de applicatie 'NightWatch Updater' kunt installeren op uw **Macbook** (geen iPad). Met deze applicatie kunt u uw NightWatch updaten zodat u gebruik kunt maken van meest recente versie.

Stap 1

Download het bestand 'NightWatchFwUpd-20220412_v155'. U kunt dit bestand downloaden via www.nightwatchepilepsy.com/nl/update. Klik op 'Updater software – Mac' om de download te starten.

NightWatch Software Updater

Via onderstaande knoppen downloadt u de NightWatch Software Updater applicatie voor uw computer. Hiermee kunt u de meest recente softwareversie op uw NightWatch installeren. Er is een versie voor Windows- en voor Macbook gebruikers.

[Updater software – Mac](#)

[Updater software – Windows](#)


[Updater installatie instructies – Mac](#)

[Updater installatie instructies – Windows](#)

1. Download het bestand via nightwatchepilepsy.com/nl/update

Stap 2


Zoek het gedownloade bestand 'NightWatchFwUpd-20220412_v155' op uw computer (kijk in uw 'Downloads' folder). Dubbelklik op dit bestand. De applicatie wordt geïnstalleerd en daarna kunt u hem openen. Klik op het icoontje van de applicatie zoals hier rechts staat afgebeeld.

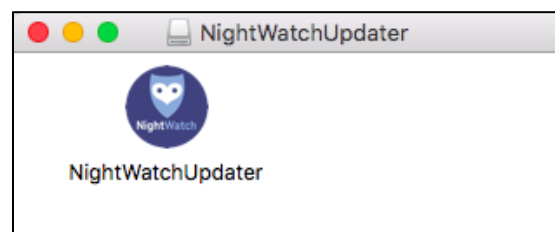

2. Open de applicatie

Stap 3

Omdat de ontwikkelaar van deze applicatie niet bekend is bij Apple, dient u door een extra beveiligingsmelding heen te klikken. Klik hiervoor eerst op OK.

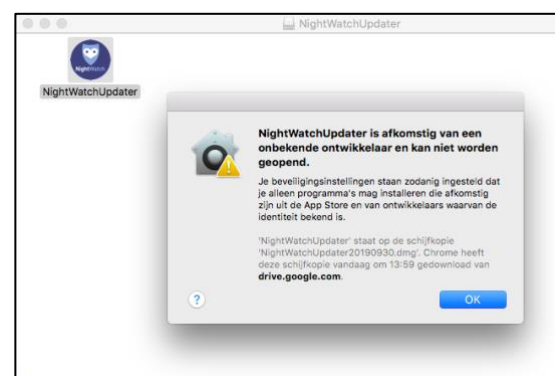

3. Klik bij deze beveiligingsmelding op OK

Stap 4

Nu moet u via uw 'Systeemvoorkeuren' aangeven dat u deze applicatie daadwerkelijk wilt openen. Klik hiervoor links bovenin uw beeldscherm op het 'Apple' icoontje en selecteer vervolgens 'Systeemvoorkeuren...'.


4. Klik op het Appletje links bovenin en klik daarna op 'Systeemvoorkeuren...'

Stap 5


Open 'Beveiliging en privacy' (of klik 'Vorige' als u een andere pagina geopend krijgt).



5. Open 'Beveiliging en privacy'

Stap 6

Klik op vervolgens op 'Open toch'

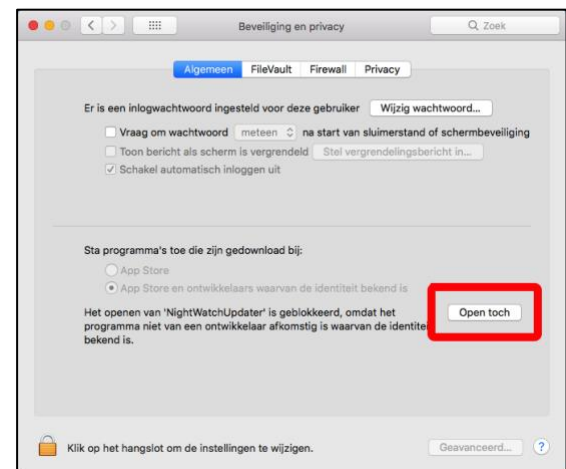


6. Klik op 'Open toch'

Stap 7

De 'NightWatch Updater' applicatie is nu geïnstalleerd en geopend. Met deze applicatie kunt u uw NightWatch zoeken en updaten.

Klik in de applicatie op 'Info' voor meer informatie hierover.

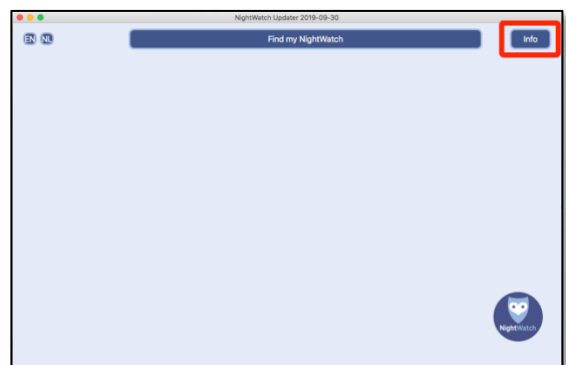

7. Applicatie is geopend. Klik op 'Info' voor meer informatie