

# Installierung Mac

NightWatch Update (v15.5)



Dieses Dokument beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie die Applikation „NightWatch Updater“ installieren können auf Ihr **Macbook**. Anhand dieser Applikation können Sie Ihre NightWatch aktualisieren.

## Schritt 1.

Laden Sie die Datei „NightWatchFwUpd-20220412\_v155“ herunter. Sie können diese Datei herunterladen über [www.nightwatchepilepsy.com/de/update](http://www.nightwatchepilepsy.com/de/update). Drücken Sie auf „Updater software - Mac“, um den Download zu starten.

### NightWatch Software Updater

Via onderstaande knoppen downloadt u de NightWatch Software Updater applicatie voor uw computer. Hiermee kunt u de meest recente softwareversie op uw NightWatch installeren. Er is een versie voor Windows- en voor Macbook gebruikers.

[Updater software - Mac](#)

**[Updater software - Windows](#)**


[Updater installatie instructies - Mac](#)

[Updater installatie instructies - Windows](#)

1. Laden Sie die Datei herunter über [nightwatchepilepsy.com/update](http://nightwatchepilepsy.com/update)

## Schritt 2.


Suchen Sie die heruntergeladene Datei „NightWatchFwUpd-20220412\_v155“ auf Ihrem Computer (schauen Sie in Ihre „Downloads“ Mappe). Doppelklicken Sie auf dieser Datei. Die Applikation wird installiert und danach können Sie sie öffnen. Klicken Sie auf das Symbol der Applikation wie hier rechts abgebildet

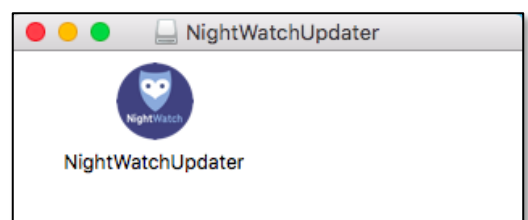

2. Öffnen der Applikation

## Schritt 3.


Dadurch dass der Entwickler dieser Applikation bei Apple nicht bekannt ist, müssen Sie sich durch eine zusätzliche Sicherheitsmeldung hindurchklicken. Drücken Sie dafür erst auf OK.

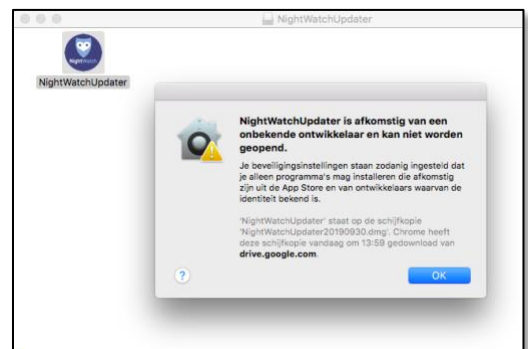

3. Klicken Sie bei dieser Sicherheitsmeldung auf „OK“.

## Schritt 4.

Jetzt müssen Sie über Ihre „Systempräferenzen“ angeben, dass Sie diese Applikation tatsächlich öffnen möchten. Klicken Sie dafür links oben auf Ihrem Bildschirm auf das „Apple“-Symbol und wählen Sie danach „Systempräferenzen...“.

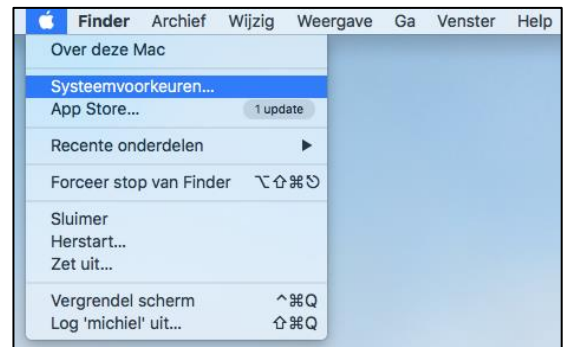

4. Klicken Sie auf das „Apple“-Symbol links oben und klicken Sie danach auf „Systempräferenzen...“.

## Schritt 5.


Öffnen Sie „Sicherheit und Datenschutz“ (oder klicken Sie „Zurück“, sollte eine andere Seite geöffnet werden).



5. Öffnen Sie „Sicherheit und Datenschutz“.

## Schritt 6.

Klicken Sie danach auf „Doch öffnen“.

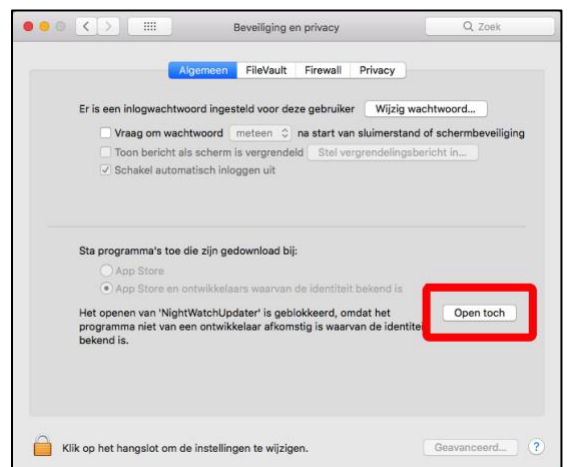


6. Klicken Sie auf „Doch öffnen“

## Schritt 7.

Die „NightWatch Updater“-Applikation ist jetzt installiert und geöffnet. Mit dieser Applikation können Sie Ihre NightWatch suchen und aktualisieren.

Klicken Sie in der Applikation auf „Info“ für mehr Information hierüber.

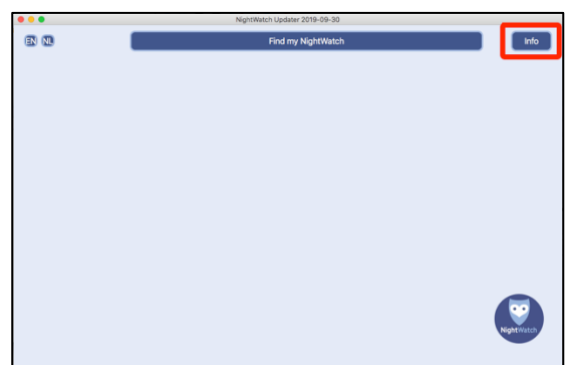

7. Applikation ist geöffnet. Klicken Sie auf „Info“ für mehr Information.